

Tracabilité de la Stérilisation

Nouveau moyen de mise en place de la procédure de tracabilité de la stérilisation

Impression avec une Pince à étiqueter du N° de stérilisation et date sur une étiquette qui va suivre l'instrument jusqu'à la fiche d'intervention ou le carnet de tracabilité.

Avant la stérilisation : Vous affichez la date et le N° sur la pince à étiqueter

Impression rapide d'autant d'étiquettes que nécessaire

l'étiquette est collée sur le sachet de stérilisation (**colle permanente**)

Pendant la stérilisation : l'étiquette conserve les informations et **ne peut pas se décoller** et la bande d'encre change de couleur (**encre réagissant à la chaleur**)


A l'utilisation et au moment souhaité : Vous pouvez décoller l'étiquette du sachet pour la recoller sur la fiche d'intervention ou sur votre carnet de tracabilité (**de façon permanente**)

Les Moyens :

- 1 x pince à étiqueter avec deux compteurs :

1° ligne : 10 caractères : JJMA--JJMA 2° ligne : 10 caractères alphanumériques

- 6 X Bobines de 500 étiquettes pré imprimées (avec double adhésif)
et avec bande réagissant à la chaleur (format 26x16)

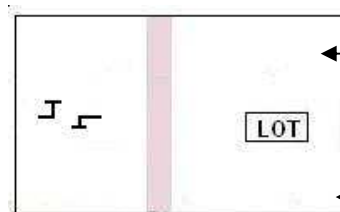

2 Compteurs « date »

N° Lot en 10 caractères

Economique, Fiable, Rapide, Facile

Pas de Batterie à recharger, Pas de Panne informatique, Chargement de la bobine simplifiée, Exploitation de l'information au moment souhaité grâce à l'Etiquette avec adhésif double enduction.